

## Tactee

El sistema Tactee permite restaurar la autonomía funcional y la independencia en los gestos diarios de las personas con déficit funcional de agarre mono o bilateral, con el objetivo de mejorar su "calidad de vida".

## El sistema

Pacientes que padecen enfermedades como tetraplejía, hemiplejía post-ictus, esclerosis múltiple o todos esos eventos.

Enfermedades mórbidas que resultan en un déficit funcional de una o ambas extremidades superiores hasta hoy, en aquellas que están. Las prácticas motoras principales donde se "utilizan" las mismas artes, deben ser asistidas inevitablemente y diariamente, por terapeutas ocupacionales en el campo de la rehabilitación o por la familia y/o "cuidadores" en el entorno doméstico/social. El sistema Tactee permite a cada uno de estos pacientes el "retorno" de la autonomía funcional y la independencia en una multiplicidad de gestos diarios como comer, beber, escribir, etc., en la "total" ausencia de las figuras que los asisten. Y que hasta hoy, hay que considerarlo indispensable.

Todo esto es posible gracias a una serie de herramientas útiles para la ejecución de diferentes funciones (como, por ejemplo, cubiertos) que se acoplan con un elemento de agarre que permite las operaciones de enganche / desenganche y el reemplazo de herramientas de una manera fácil, rápida y autónoma.

Además, en el sistema, hay adaptadores que permiten utilizar varios objetos de uso común, como por ejemplo el de un cepillo de dientes para cepillarse los dientes.

## El método

El **Método Tactee** prevé el uso de este sistema a lo largo de la ruta de rehabilitación del paciente y el uso posterior en cualquier contexto, de una manera simple, discreta y con total autonomía.

Los motivos inspiradores para el desarrollo y diseño del sistema Tactee, tienen en cuenta, así como los principios fundamentales de funcionalidad, simplicidad y autonomía, aspectos estéticos específicos que se pueden utilizar fácilmente.

y discretamente en cualquier contexto, incluido el social.

Hasta ahora, la respuesta a estas necesidades era y se confía a dispositivos que requieren una función de agarre residual y que, en cualquier caso, siempre necesitan la asistencia de un "cuidador".

Normalmente estas acciones se llevan a cabo frente al uso de una carga grande, tanto de energía como de atención, sin garantizar, sin embargo, un resultado final aceptable.

En su lugar, Tactee explota el concepto de acoplamiento entre varios elementos para garantizar un alto rendimiento.

Funcional en absoluta autonomía y seguridad.

La elección de los materiales para cada uno de los elementos que componen el sistema Tactee se ha desarrollado de acuerdo con los mejores criterios de hipoalérgico, confort, durabilidad y simplicidad de limpieza.

El dispositivo se adapta al usuario y no al revés gracias a un diseño ergonómico que permite un "ajuste" perfecto e inmediato en la mano de quien lo lleva.

## Tabla de medidas

| Elemento de agarre  |                               |   |
|---|-------------------------------|---|
| Disponible en 3 tamaños en versión ambidiestro.<br>La medida correcta de este elemento es identificable a través de los orificios presentes en su estructura y se refiere a la circunferencia de la palma de la mano. |                               |   |
|    | <b>PEQUEÑO</b><br>19cm a 22cm |  |
|   |                               |  |
|   |                               |   |
| Otros elementos   |                               |   |
| Disponible en talla única en la versión ambidiestra.  |                               |   |

## COMPOSICIÓN DEL SISTEMA DE TACTEE.

El sistema Tactee consta de los siguientes elementos.



Elemento de agarre  
(cod. TT-01)



Relleno para elemento de agarre  
(cod. TT-07)



Tenedor  
(cod. TT-02)



Cucharas  
(cod. TT-03)



Cuchillo  
(cod. TT-04)



Adaptador universal  
(cod. TT-05)





Adaptador de botella / vidrio  
disponible bajo pedido  
(cod. TT-06)

## SISTEMA AUXILIAR MAGNÉTICO



Simplificar los gestos cotidianos.

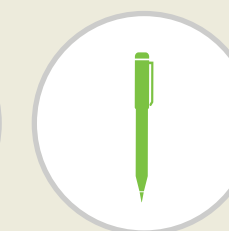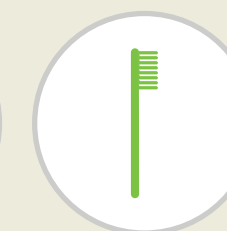

TACTEE SYSTEM KIT



**TENEDOR**  
con mango magnetizado



**CUCHARA**  
con mango magnetizado



**CUCHILLO**  
con mango magnetizado



**ELEMENTO DE PRESIÓN**  
con estructura palmar magnetizada para acoplarse con todos los demás elementos del sistema Tactee



ELEMENTOS DE ACOPLAMIENTO MAGNETICO



**ADAPTADOR UNIVERSAL**  
con estructura magnetizada útil para la aceptación de diferentes objetos (cepillo de dientes, maquinilla de afeitarse, pluma, etc.)



**RELLENO**  
para buen agarre del elemento



**ADAPTADOR**  
para botella o vaso con estructura magnetizada



**Sistema de acoplamiento**

Para que la acción de acoplamiento entre los diferentes elementos del sistema Tactee sea estable y satisfactoria, verifique que los tres imanes colocados en el elemento de agarre coincidan con los tres imanes colocados en el elemento a enganchar.



**Acoplamiento entre el elemento de agarre y los diversos cubiertos (tenedor, cuchara, cuchillo)**

Aplique el elemento de agarre a la mano y ajuste sus correas. Ahora lleve los imanes ubicados en la parte inferior del elemento de agarre cerca de los cubiertos que desea acoplar hasta que estén firmemente enganchados.



**Acoplamiento entre el elemento de agarre y el adaptador universal.**

Antes de acoplar el elemento de agarre con el adaptador universal, inserte el objeto que desea usar dentro del adaptador (cepillo de dientes, maquinilla de afeitarse, bolígrafo, etc.). Siempre asegúrese de que el tamaño del objeto a insertar tenga una dimensión que se ajuste al orificio del adaptador. Ahora mueva el elemento de agarre más cerca del adaptador universal, asegurándose de que el extremo del objeto insertado en el adaptador apunte en la dirección correcta.



**Acoplamiento entre el elemento de agarre y el adaptador de botella / vidrio (disponible solo bajo pedido)**

Antes de acoplar el elemento de agarre con la botella / adaptador de vidrio, envuelva los dos tirantes con cierres de Velcro® alrededor del objeto a utilizar. Asegúrese de que los dos tirantes con cierres de Velcro® estén cerrados alrededor del objeto de manera estable y segura. Ahora coloque el elemento de agarre cerca de la botella / adaptador de vidrio.



**Desacoplamiento entre el elemento de agarre y los diversos elementos**

**Cubiertos - Adaptador universal**  
Gire levemente y gradualmente la muñeca hacia la derecha o hacia la izquierda hasta que el elemento de agarre se desenganche progresivamente del elemento enganchado.

**Adaptador de botella / vidrio**  
Si el objeto que se va a desacoplar debe permanecer en una posición vertical (por ejemplo, una botella), ejerza un ligero empuje o jale el adaptador para desacoplarlo cuando los dos elementos están separados unos de otros.

